



ODA MEDICAL

DYSTRYBUCJA MEDYCZNA



REVOLAX™

MONOFAZOWY, USIECIOWANY WYPEŁNIACZ SKÓRNY NA BAZIE KWASU HIALURONOWEGO

ODA MEDICAL



REVOLAX™



Wyjątkowe ROZWIĄZANIE

Poznaj Revolax™

Revolax™ to monofazowy, usieciowany wypełniacz skórny o wysokim stężeniu kwasu hialuronowego (HA), przeznaczony do:

**korekcji utraty objętości tkanek,
niwelowania asymetrii morfologicznej twarzy.**

Produkt posiada **certyfiakat CE** i jest wyrobem medycznym wprowadzonym na rynek w **2012 roku**. Jest dystrybuowany do **47 krajów**, a jego produkcja przekroczyła **40 milionów ampułkostrzykawek**.



GAMA PREPARATÓW REVOLAX™

Wszystkie preparaty zawierają **kwasy hialuronowe**
o stężeniu 24 mg/ml oraz 0,3% lidokainy.



Właściwości REOLOGICZNE

Analiza
wiskoelastyczności (G')
w funkcji kąta fazowego (δ)
wykazuje utrzymanie
**kontrolowanych
parametrów przy
wysokim stężeniu HA.**



Produkt charakteryzuje
się **spójną teksturą
i elastycznością**
dostosowaną do różnych
obszarów iniekcji.

Stąły opór
(siła ekstruzji) umożliwia
równomierne podawanie żelu.

REVOLAX™

Revolax™ **Fine** z lidokainą

Zastosowanie

Drobne zmarszczki,
zmarszczki mimiczne,
usta

Czas utrzymywania się efektu

9-12 miesięcy

Igła / technika


30G, liniowa / depozytowa
/ wachlarzowa

pH

6,8 - 7,5

Lidokaina

0,3%

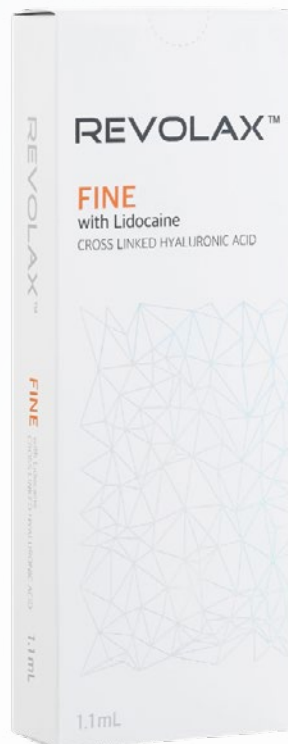

**DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ**



Niski parametr G' oraz relatywnie wysoki kąt fazowy
pozwalają na korekcję delikatnych i powierzchniowych zmarszczek.

Revolax™ Deep z lidokainą



Zastosowanie

Średniogłębokie i głębokie
zmarszczki, modelowanie ust,
konturowanie owalu twarzy

Czas utrzymywania się efektu

12-18 miesięcy

Igła / technika

27G, liniowa / depozytowa
/ wachlarzowa

pH

6,8 - 7,5

Lidokaina

0,3%

Zrównoważone właściwości reologiczne, umiarkowany parametr G' oraz kąt fazowy pozwalają na dopasowanie do różnych obszarów zabiegowych i głębokości zmarszczek.

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ



REVOLAX™

Revolax™ **Sub-Q** z lidokainą

Zastosowanie

Głębokie zmarszczki, wolumetria twarzy, konturowanie policzków, brody, linii żuchwy

Czas utrzymywania się efektu

12-18 miesięcy

Igła / technika


25G, liniowa / depozytowa / wachlarzowa

pH

6,8 - 7,5

Lidokaina

0,3%

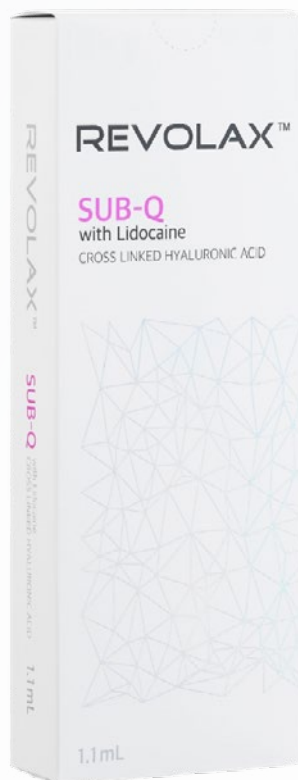

**DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ**



Wysoki parametr G' i niski kąt fazowy zapewniają silne podtrzymanie struktur skóry i przywracanie utraconej objętości.

Jakość I BEZPIECZEŃSTWO

Produkt spełnia wymagania **ISO 13485**,
posiada certyfikat **CE** i jest zgodny z GMP.

Kwas hialuronowy
pochodzenia
niezwierzęcego.

Lidokaina 0,3%
zmniejsza dyskomfort
podczas iniekcji.

Brak żywych
mikroorganizmów
dzięki sterylizacji.



Wieloetapowa
kontrola jakości:
reologia, lepkość,
stężenie HA i lidokainy
w każdej partii.

Stabilność właściwości
reologicznych
zachowana podczas
sterylizacji wysoką
temperaturą
z następującym po niej
szybkim schładzaniem.



dane KLINICZNE

Zmiana grubości skóry właściwej

ok. 2. tydzień: +0,59 cm
ok. 24. tydzień: +0,34 cm
48. tydzień: +0,20 cm ($p < 0,01$)

Poprawa estetyczna – GAIS

wysokie wskaźniki poprawy w ocenie
badaczy i pacjentów w okresie
do 24 tygodni po zabiegu.

warunki PRZECHOWYWANIA

Chronić przed światłem
Przechowywać w temperaturze 2°C – 25°C



REVOLAX™



ODA MEDICAL

DYSTRYBUCJA MEDYCZNA

odamedical.pl

