



# ODA MEDICAL

DYSTRYBUCJA MEDYCZNA

**REVOL**

**SUB-Q**  
with Lidocaine

CROSS LINKED HYALURONIC ACID

**REVOL**

**DEEP**  
with Lidocaine

CROSS LINKED HYALURONIC ACID

**REVOL**

**FINE**

with Lidocaine

CROSS LINKED HYALURONIC ACID

**REVOLAX™**

MONOFAZOWY, USIECIOWANY WYPEŁNIACZ SKÓRNY NA BAZIE KWASU HIALURONOWEGO

ODA MEDICAL



REVOLAX™



# Wyjątkowe ROZWIĄZANIE

## Poznaj Revolax™

Revolax™ to monofazowy, usieciowany wypełniacz skórny o wysokim stężeniu kwasu hialuronowego (HA), przeznaczony do:

**korekcji utraty objętości tkanek,  
niwelowania asymetrii morfologicznej twarzy.**

Produkt posiada **certyfiakat CE** i jest wyrobem medycznym wprowadzonym na rynek w **2012 roku**. Jest dystrybuowany do **47 krajów**, a jego produkcja przekroczyła **40 milionów ampułkostrzykawek**.



# GAMA PREPARATÓW REVOLAX™

Wszystkie preparaty zawierają **kwasy hialuronowe**  
**o stężeniu 24 mg/ml oraz 0,3% lidokainy.**



# Właściwości REOLOGICZNE

Analiza  
wiskoelastyczności ( $G'$ )  
w funkcji kąta fazowego ( $\delta$ )  
wykazuje utrzymanie  
**kontrolowanych  
parametrów przy  
wysokim stężeniu HA.**



Produkt charakteryzuje  
się **spójną teksturą  
i elastycznością**  
dostosowaną do różnych  
obszarów iniekcji.

Stały opór  
(siła ekstruzji) umożliwia  
**równomierne podawanie żelu.**

REVOLAX™

# Revolax™ **Fine** z lidokainą

## Zastosowanie

Drobne zmarszczki,  
zmarszczki mimiczne,  
usta

## Czas utrzymywania się efektu

9-12 miesięcy

## Igła / technika


30G, liniowa / depozytowa  
/ wachlarzowa

## pH

6,8 - 7,5

## Lidokaina

0,3%

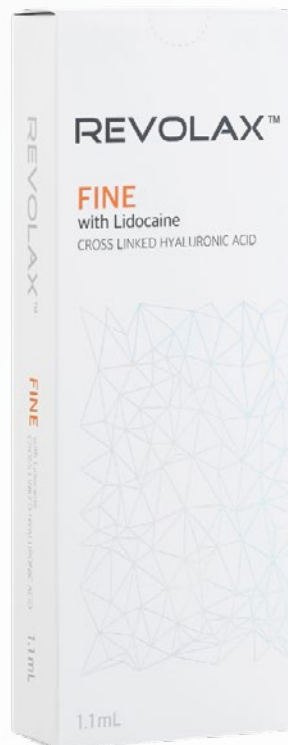

**DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ**



Niski parametr  $G'$  oraz relatywnie wysoki kąt fazowy  
pozwalają na korekcję delikatnych i powierzchniowych zmarszczek.

# Revolax™ Deep z lidokainą



## Zastosowanie

Średniogłębokie i głębokie  
zmarszczki, modelowanie ust,  
konturowanie owalu twarzy

## Czas utrzymywania się efektu

12-18 miesięcy

## Igła / technika

27G, liniowa / depozytowa  
/ wachlarzowa

## pH

6,8 - 7,5

## Lidokaina

0,3%

Zrównoważone właściwości reologiczne, umiarkowany parametr G' oraz kąt fazowy pozwalają na dopasowanie do różnych obszarów zabiegowych i głębokości zmarszczek.

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ



REVOLAX™

# Revolax™ **Sub-Q** z lidokainą

## Zastosowanie

Głębokie zmarszczki, wolumetria twarzy, konturowanie policzków, brody, linii żuchwy

## Czas utrzymywania się efektu

12-18 miesięcy

## Igła / technika


25G, liniowa / depozytowa / wachlarzowa

## pH

6,8 - 7,5

## Lidokaina

0,3%

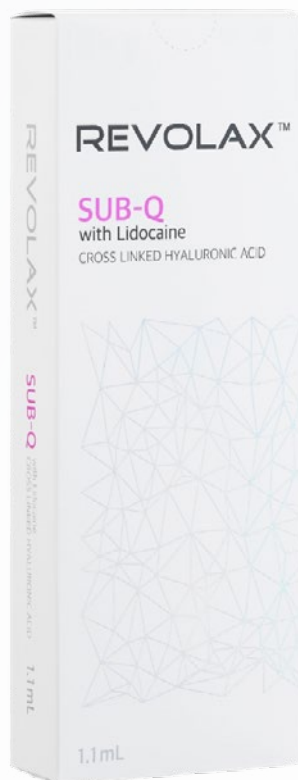

**DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ**



Wysoki parametr G' i niski kąt fazowy zapewniają silne podtrzymanie struktur skóry i przywracanie utraconej objętości.

# Jakość I BEZPIECZEŃSTWO

Produkt spełnia wymagania **ISO 13485**,  
posiada certyfikat **CE** i jest zgodny z GMP.

**Kwas hialuronowy**  
pochodzenia  
niezwierzęcego.

**Lidokaina 0,3%**  
**zmniejsza dyskomfort**  
podczas iniekcji.

**Brak żywych**  
**mikroorganizmów**  
dzięki sterylizacji.



**Wieloetapowa**  
kontrola jakości:  
reologia, lepkość,  
stężenie HA i lidokainy  
w każdej partii.

**Stabilność właściwości**  
**reologicznych**  
zachowana podczas  
sterylizacji wysoką  
temperaturą  
z następującym po niej  
szybkim schładzaniem.

REVOLAX™



# *dane* KLINICZNE

## **Zmiana grubości** skóry właściwej

ok. 2. tydzień: +0,59 mm  
ok. 24. tydzień: +0,34 mm  
48. tydzień: +0,20 mm ( $p < 0,01$ )

## **Poprawa estetyczna – GAIS**

wysokie wskaźniki poprawy w ocenie  
badaczy i pacjentów w okresie  
do 24 tygodni po zabiegu.

# *warunki* PRZECHOWYWANIA

Chronić przed światłem  
Przechowywać w temperaturze 2°C – 25°C



# ODA MEDICAL

## więcej niż dystrybucja

### 10+ lat doświadczenia w medycynie estetycznej

Od ponad dekady budujemy wiedzę, doświadczenie i relacje na rynku medycyny estetycznej. Znamy potrzeby lekarzy, klinik i naszych partnerów biznesowych.

### Bezpieczny transport w kontrolowanej temperaturze

Dbamy o odpowiednie warunki przechowywania i transportu produktów na każdym etapie dostawy – od producenta do klienta.

### Oryginalne produkty Pewne źródło

Współpracujemy z renomowanymi producentami i dbamy o transparentne pochodzenie oferowanych produktów. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i autentyczność.

### 1+ mln sprzedanych ampułkostrzykawek

Skala, która potwierdza zaufanie do naszych produktów i kompetencje w ich profesjonalnej dystrybucji.

### Wsparcie lekarzy i profesjonalistów

Jesteśmy więcej niż dystrybutorem. Zapewniamy dostęp do wiedzy, szkoleń, materiałów edukacyjnych i profesjonalnego wsparcia, pomagając naszym partnerom rozwijać ich praktykę.



# ODA MEDICAL

DYSTRYBUCJA MEDYCZNA

**odamedical.pl**

